



Antes de comenzar: Si compró en un minorista como Amazon, Walmart, etc., deberá visitar: shop.handsfreehealth.com/activate para comprar una suscripción.

Sugerencia de configuración: Un familiar o amigo puede configurar su reloj de forma remota si necesita ayuda.

Primeros pasos: configuración de su nuevo reloj WellBe®

1 Conecte el reloj a la base de carga y conéctelo a una toma de corriente.



2 Encendido: mantenga presionado el botón lateral durante **4 segundos**.

El inicio tardará unos segundos.



3 Es posible que el reloj le solicite que actualice el software. Seleccione **Sí**.

4 Seleccione idioma: **Español**.



5 Presione "Iniciar" en las siguientes dos pantallas para recibir el **Código de activación**.




6 Descargue la **aplicación WellBe Virtual Assistant**.




7 Siga los pasos para **crear un usuario y registrar su dispositivo**. Responda "No" cuando se le pregunte si tiene un código de invitación.



Elija la configuración del dispositivo "**WellBe Smart Watch**".

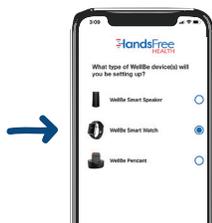


8 Complete los pasos 1 y 2. **Confirme** o **crea una cuenta** para el usuario de la aplicación que administra el dispositivo. Verificar número de móvil.

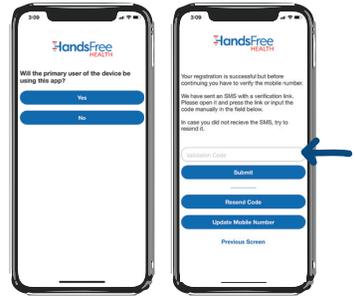

9 Ingrese el **código de activación en la aplicación WellBe Virtual Assistant**.

Lea y acepte los **Términos de servicio**.

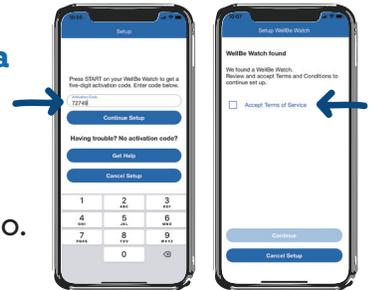

10 Asigne un nombre a su WellBe y proporcione un número de teléfono para devolverle la llamada. Ingrese su dirección y cualquier información que desee brindar a los socorristas.

11 Asigne **contactos de emergencia**. Nuestro centro de llamadas les notificará después de que se haya enviado la ayuda.



¡Ya terminaste! Realice una llamada de prueba para ver cómo funciona.

Para llamar a atención al cliente: **1-888-415-3866** o correo electrónico: support@HandsFreeHealth.com

Para más información: HandsFreeHealth.com/support

Conociendo su reloj: Accediendo al menú después de la activación



Presione una vez el botón redondo para abrir el menú.



Desliza hacia la izquierda o hacia la derecha.



Toque el icono para seleccionar.

Características: Comprensión del menú



Llamada de emergencia: Toque para realizar una llamada de emergencia. Alternativamente, puede presionar y mantener presionado el botón lateral redondo durante 4 segundos. Permanezca en la línea hasta que hable con un agente.



Llamar a contacto: Toque para llamar al contacto de emergencia que aparece primero.



Podómetro: Simplemente camina. Tus pasos serán rastreados. Se reinicia cada día.



Frecuencia cardíaca: Toque para medir la frecuencia cardíaca.



WellBe: Toca el micrófono para hablar. Utilice el mensaje de voz "**Llamar a [nombre del contacto]**" para llamar a cualquiera de sus contactos.

Para suscriptores de WellBe® Chat: diga "**OK WellBe, charlemos**" para tener una conversación interactiva utilizando tecnología de inteligencia artificial.



Notificaciones: Las notificaciones aparecerán si las configura en su aplicación **WellBe® Virtual Assistant**.

Llamada de emergencia: Dos formas de realizar una llamada SOS

Ambas formas lo conectan con nuestro centro de llamadas 24 horas al día, 7 días a la semana y le brindan su ubicación GPS para una respuesta rápida.



Método 1

Mantenga presionado el botón lateral durante **4 segundos**. Permanezca en la línea hasta que hable con un agente.



Método 2

Presione el **ícono de Llamada de emergencia** en el menú.



Con cualquiera de los métodos tienes **7 segundos** para cancelar una llamada de emergencia, o puedes presionar **Llamar ahora**.

Solo para clientes de detección de caídas: Se contacta a los servicios de emergencia solo en **caso de caídas fuertes**. Si es posible, presione el botón de emergencia después de una caída.